


GRÖSSE S: 17 mm



GRÖSSE M: 20 mm



GRÖSSE L: 23 mm

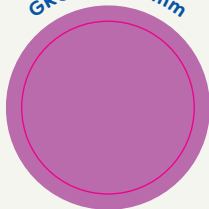

Stillhütchen

zur kurzfristigen Unterstützung in der Stillzeit

- Innovative Schmetterlingsform bietet guten Halt und maximalen Hautkontakt
- Hauchdünnes MAM SkinSoft™ Silikon für ein vertrautes Stillgefühl
- Einzigartige Noppenstruktur

Hebammen sind begeistert:

„Qualitativ sehr gut. Leicht wie eine zweite Haut.“

„Meine absoluten Lieblingsstillhütchen.“

„Habe ich immer in meiner Hebammentasche.“*



Mit Sterilisier- & Transportbox für eine hygienische Aufbewahrung



SKIN
SOFT™
SILICONE



BPA/BPS
FREE°

MAM Babyartikel GmbH

E-Mail: service4professionals@mambaby.com,
mambaby.com/professionals, Copyright 2023

* MAM Hebammen-Produkttest
MAM Stillhütchen, DE/AT, 11/2022, n=114
° Alle MAM Produkte sind aus BPA- und
BPS-freien Materialien.

MAM Stillhütchen-Schablone, Stand 11/23





Stillhütchen


Finde deine richtige Größe

1. Brustwarze **nach** dem Stillen oder Abpumpen messen
2. Die Größe deiner Brustwarze ist entscheidend, nicht die des Brustwarzenhofes (siehe **grüne** Linie in der Grafik)
3. Finde die richtige Größe mit Hilfe der Schablone (rechts)

TIPP: Wenn du deine Größe nach dem Stillen nicht messen kannst, füge 2 mm zu deiner eigentlichen Brustwarzengröße hinzu.

Beim Tragen des Stillhütchens sollte deine Brustwarze weder zu eingedrückt sein, noch sollte das Hütchen zu locker sitzen.

Stillhütchen sind eine kurzfristige Unterstützung.
Lass' dich durch eine Hebamme oder Stillberaterin beraten.

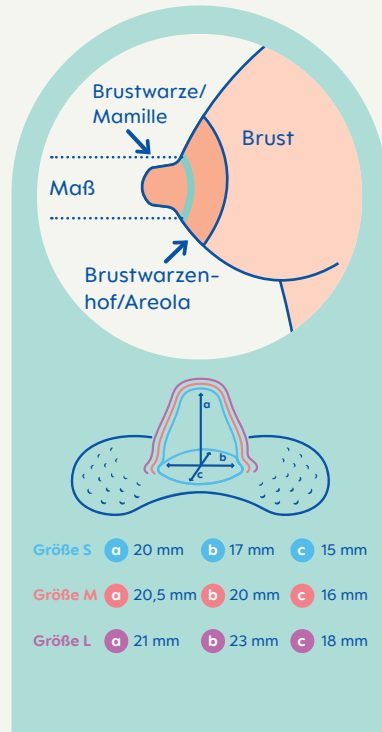


Größe S **a** 20 mm **b** 17 mm **c** 15 mm


Größe M **a** 20,5 mm **b** 20 mm **c** 16 mm

Größe L **a** 21 mm **b** 23 mm **c** 18 mm

GRÖSSE S: 17 mm

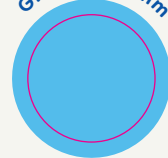

GRÖSSE M: 20 mm

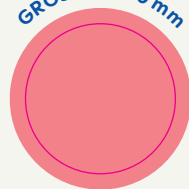

GRÖSSE L: 23 mm

