



# Preemie Product Training Sheet

MAM Preemie soother/pacifier for premature babies, Chupeta MAM Preemie para bebês prematuros, MAM Preemie Schnuller für Frühgeborene, MAM Preemie narresut til for tidligt fødte børn, Πιπίλα MAM Preemie για πρόωρα βρέφη, Chupete MAM Preemie para bebês prematuros, MAM Preemie - keskos tutti, Sucette MAM Preemie pour bébés prématurés, MAM Preemie ciuccio per neonati prematuri, MAM Preemie smokk for premature barn, MAM Preemie voor premature baby's, Smoczek dla wcześniaków MAM Preemie, Succhietto MAM Preemie per neonati premature, MAM Preemie napp for prematura barn. MAM Preemie cumi koraszülötteknek

## PREEMIE SIZE 1 & 2

For babies weighing:  
<1.000g



Preemie size 1

For babies weighing:  
900g – 1.500g




Preemie size 2

## FITTING OPTIONS FOR PREEMIE SIZE 1



Custom fitting

## FITTING OPTIONS FOR PREEMIE SIZE 2

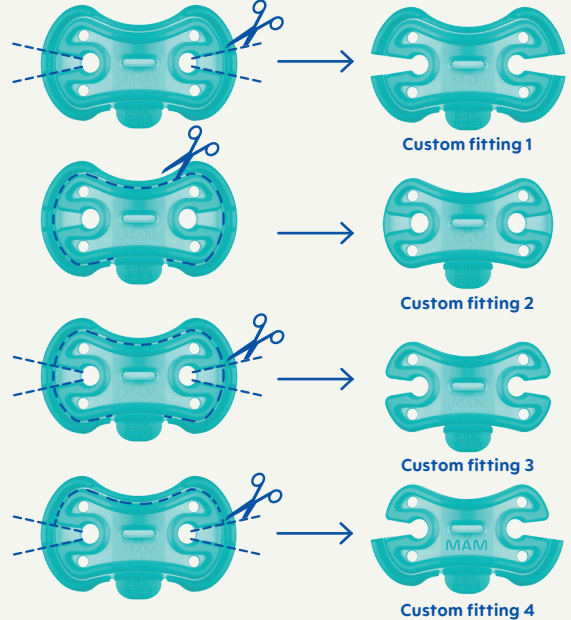

Custom fitting 1

Custom fitting 2

Custom fitting 3

Custom fitting 4



**EN:** Read WARNINGS and Instructions for use enclosed in every outer box. Product Training Sheet is available on [mambaby.com/professionals](http://mambaby.com/professionals). MAM Preemies are medical devices (CE/UKCA) for premature babies and they are only suitable for hospital use. They are intended to compensate for the sucking and swallowing weaknesses in premature babies. MAM Preemies do not meet the safety standards which are applied to normal soothers namely EN 1400 and 16 CFR 1511. The product poses a choking hazard. Therefore, MAM Preemies must only be used under medical supervision. Parents must never be allowed to take the product home. Only use for one baby. Autoclavable from 121°C/250°F - 134°C/273°F, for 15 (min.) to 18 (max.) minutes (max. 20 times).



Follow instructions for use and on how to clean. Please give us your feedback on our product (product improvements, complaints, experience, etc.) For complaints, please return the product to us and enclose the date of purchase, the LOT-Number (printed on packaging, if available), pictures and a detailed description of the issue. Contact us on [mambaby.com](http://mambaby.com)

UK: Return address: MAM UK, Marvan Court, Block C, Ground Floor, 1 Waldegrave Road, Teddington, TW11 8LZ, United Kingdom.  
Contact email: [medical@mamuk.com](mailto:medical@mamuk.com) Office contact phone: 020 8943 8880. For emergencies outside office hours, please phone: 07968 065451.

US: Email: [NICUcustomerservice@mambaby.com](mailto:NICUcustomerservice@mambaby.com). Phone number: 914-468-4048



**BR:** Leia os AVISOS e instruções de uso incluídos em toda embalagem externa. A página de treinamento sobre o produto está disponível em [mambaby.com/professionals](http://mambaby.com/professionals). As chupetas MAM Preemies são dispositivos médicos (CE/UKCA) para bebês prematuros e são adequadas apenas para uso hospitalar. Destinam-se a compensar as deficiências de sucção e deglutição em bebês prematuros. As chupetas MAM Preemies não atendem às normas de segurança que se aplicam às chupetas comuns, como EN 1400 e 16 CFR 1511. O produto apresenta risco de asfixia. Portanto, as chupetas MAM Preemies só devem ser usadas sob supervisão médica. Os pais nunca podem receber permissão para levar o produto para casa. Use apenas para um bebê. Autoclavável de 121 °C/250 °F até 134 °C/273 °F, por 15 (mín.) a 18 (máx.) minutos (máx. 20 vezes).



Siga as instruções sobre o modo correto de higienizar. Envie-nos o seu feedback sobre o nosso produto (melhorias do produto, reclamações, experiências etc.). Em caso de reclamação, envie-nos o produto sobre o qual foi feita a reclamação e inclua a data da compra, o número do lote (impresso na embalagem, se ela estiver disponível), imagens e uma descrição detalhada do problema. Entre em contato conosco através do [mambaby.com](http://mambaby.com)



**DACH:** Lesen Sie die jedem Überkarton beiliegenden WARNHINWEISE und Gebrauchsanweisungen! Dieser Product Training Sheet findet sich auf [mambaby.com/professionals](http://mambaby.com/professionals). MAM Preemies sind Medizinprodukte (CE/UKCA) und nur für den Klinikgebrauch geeignet. Sie sind zum Ausgleich einer typischerweise vorhandenen Saug- und Schluckschwäche vorgesehen. MAM Preemies erfüllen nicht die für normale Schnuller geltenden Sicherheitsnormen, d. h. EN 1400 und 16 CFR 1511. Das Produkt stellt eine Erstickungsgefahr dar. Das Produkt darf daher nur unter medizinischer Aufsicht verwendet werden. Es darf Eltern nie erlaubt werden, das Produkt mit nach Hause zu nehmen. Nur für ein Baby verwenden. Das Produkt kann bei einer Temperatur zwischen 121 °C und 134 °C 15 (mind.) bis 18 (max.) Minuten lang im Autoklav sterilisiert werden (bis zu 20 Mal).



Gebrauchsanweisung im Hinblick auf die Reinigung befolgen. Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem Produkt (Produktverbesserungen, Beschwerden, Erfahrungen usw.). Senden Sie im Fall einer Reklamation das beanstandete Produkt zusammen mit dem Kaufdatum, der CHARGEN-Nummer (diese ist auf der Verpackung aufgedruckt, wenn Sie diese zur Hand haben), Bildern und einer detaillierten Beschreibung des Problems an uns zurück. Kontaktieren Sie uns unter [mambaby.com](http://mambaby.com)

DE: MAM Babyartikel GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 6-8, DE-27383 Schenefel, [medical@mam-babyartikel.de](mailto:medical@mam-babyartikel.de)  
Tel: +49 (4263) 9317-96/ Für Notfälle außerhalb der Geschäftszeiten: Tel: +49 (171) 7329250

AT: [kundenservice@mambaby.com](mailto:kundenservice@mambaby.com). Tel: 0800 – 900090/ Für Notfälle außerhalb der Geschäftszeiten: Tel: +49 (171) 7329250

CH: E-Mail: [professionals.ch@mambaby.com](mailto:professionals.ch@mambaby.com). Telefon: +41 44 787 69 90/ Für Notfälle: 044 787 69 97



**DK:** Læs ADVARSLER og brugsanvisninger, der medfølger i alle yderemballage. Produkttræningsarket er tilgængeligt på [mambaby.com/professionals](http://mambaby.com/professionals). MAM Preemies er medicinsk udstyr (CE/UKCA) til for tidligt fødte spædbørn, og de er kun velegnet til hospitalsbrug. De er beregnet til at kompensere for for tidligt fødte spædbørns forringede sutte- og synkeevne. MAM Preemies opfylder ikke de sikkerhedsstandarder, der er gældende for normale narresutter, dvs. EN 1400 og 16 CFR 1511. Produktet udgør en kvælningfare. MAM Preemies må derfor kun anvendes under sundhedsfaglig overvågning. Forældre må under ingen omstændigheder få lov til at tage produktet med hjem. Må kun anvendes til ét barn. Kan autoklaveres ved en temperatur fra 121 °C op til 134 °C i 15 (min.) til 18 (maks.) minutter (maks. 20 gange).



Følg brugsanvisningerne vedrørende rengøring. Vi modtager meget gerne feedback vedrørende vores produkt (produktforbedringer, produktklager, erfaringer med produktet etc.) I tilfælde af klager bedes du sende os det pågældende produkt og oplyse købsdatoen, varepartinummeret (trykt på emballagen, hvis den haves), billeder og en detaljeret beskrivelse af problemet. Kontakt os på [mambaby.com](http://mambaby.com)

Nr: +800 545 180 70. Email: [professionalsupport@bambino-mam.se](mailto:professionalsupport@bambino-mam.se)

BPA/BPS  
FREE<sup>o</sup>

<sup>o</sup>BPA/BPS free:  
This MAM product is  
made from materials  
free of BPA & BPS.



Medical Device  
Class 1

