

Produktschulungsbogen

Product Training Sheet




DE: MAM Premie Schnuller für Frühgeborene

EN: MAM Premie soother for premature babies

FR: MAM Premie pour bébés prématurés

NL: MAM Premie voor premature baby's

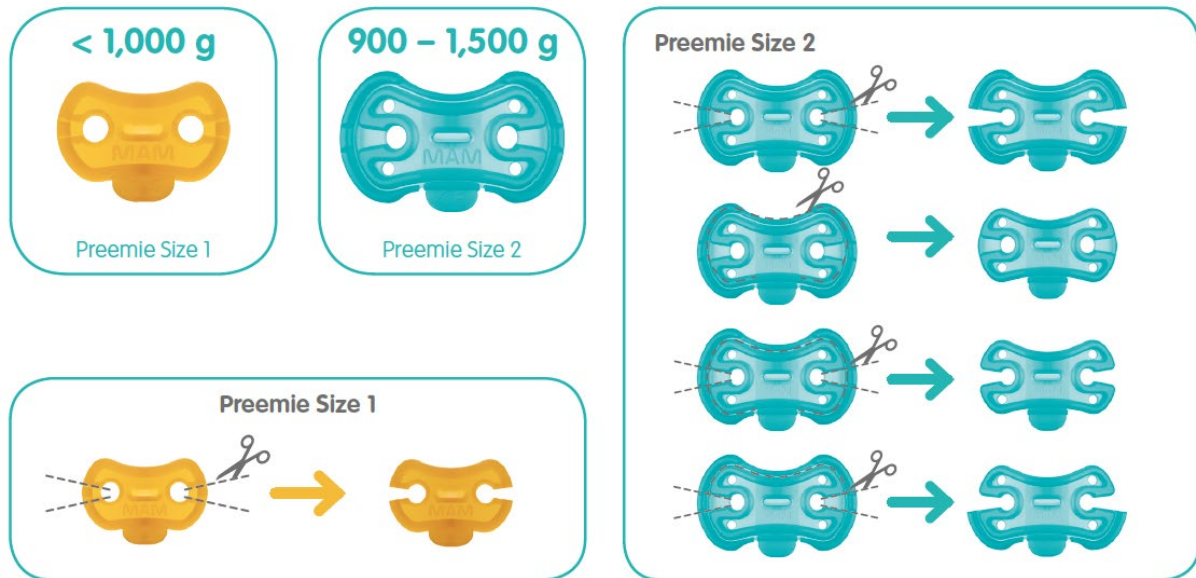

DE: Lesen Sie die jedem Überkarton beiliegenden WARNHINWEISE und Gebrauchsanweisungen! Dieser Produktschulungsbogen steht auf mambaby.com/professionals zur Verfügung. Das Produkt erfüllt nicht die für normale Schnuller geltenden Sicherheitsnormen, d. h. EN 1400 und 16 CFR 1511. Es stellt eine Erstickungsgefahr dar. Das Produkt darf daher nur unter medizinischer Aufsicht verwendet werden. Es darf Eltern nie erlaubt werden, das Produkt mit nach Hause zu nehmen. Nur für ein Baby verwenden. Autoklavierbar bis zu 134°C (max. 20 Mal).



Gebrauchsanweisung im Hinblick auf die Reinigung befolgen.

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem Produkt. (Produktverbesserungen, Beschwerden, Erfahrungen usw.). Senden Sie im Fall einer Reklamation das beanstandete Produkt zusammen mit dem Kaufdatum, der CHARGEN-Nummer (diese ist auf der Verpackung aufgedruckt, wenn Sie diese zur Hand haben), Bildern und einer detaillierten Beschreibung des Problems an uns zurück. Kontaktieren Sie uns unter mambaby.com/professionals

Ihr Kontakt für Medizinprodukte (für Deutschland):

E-Mail: medical@mam-babyartikel.de

Telefon: +49 (4263) 9317-96

Für Notfälle außerhalb der Geschäftszeiten: Telefon: +49 (171) 7329250



NL: Lees altijd waarschuwingeninstructies en gebruiksaanwijzingen. Een vragenlijst m.b.t. producttraining is te vinden op www.mambaby.com/professionals. Het product voldoet niet aan de zekerheidseisen van gewone fopspeen, d.w.z. EN 1400 en 16 CFR 1511. Het bestaat gevaar voor verstikking. Product mag alleen onder medisch toezicht worden gebruikt. Ouders mogen het niet mee naar huis nemen. Slechts voor één baby gebruiken. Autoclaafbaar t/m 134°C (max. 20 keer).



Gebbruiksaanwijzing m.b.t. reiniging volgen.

Graag feedback geven op het product (productverbeteringen, bezwaren, ervaringen, etc.). In het geval van een reclamatie het betrokken product insturen - samen met de factuur, de productie code (staat op de verpakking van het product zo dan deze nog beschikbaar is), foto's en een gedetailleerde omschrijving van het probleem. Contactinformatie op mambaby.com/professionals.

Uw contact voor medische hulpmiddelen (in Nederland)

E-Mail: medical@mam-babyartikel.de

Voor noodgevallen buiten kantooruren: telefoon: +31 (6) 42836864





EN: Read WARNINGS and Instructions for use enclosed in every outer box. This Product Training Sheet is available on mambaby.com/professionals. The product does not meet the safety standards which are applied to normal soothers namely EN 1400 and 16 CFR 1511. It poses a choking hazard. Therefore, it must only be used under medical supervision. Parents must never be allowed to take the product home. Only use for one baby. Autoclavable up to 134°C/273°F (max. 20 times).



Follow instructions for use on how to clean. Please give us your feedback on our product (product improvements, complaints, experience, etc.) In case of complaint, please send us the complained product and enclose the date of purchase, the LOT-Number (printed on Packaging, if on hand), pictures and a detailed description of the problem. Contact us on mambaby.com



FR : Lire les AVERTISSEMENTS et la notice d'utilisation inclus dans chaque carton d'emballage. La fiche de formation produit est disponible sur le site mambaby.com/professionals. Le produit ne correspond pas aux normes de sécurité EN 1400 et 16 CFR 1511 qui s'appliquent aux sucettes normales. Il présente un risque d'étouffement. Par conséquent, le produit doit uniquement être utilisé sous contrôle médical. Les parents ne doivent en aucun cas être autorisés à emporter le produit chez eux. Une sucette par bébé. Stérilisation possible en autoclave jusqu'à 134°C/273°F (20 passages maximum).



Suivre la notice d'utilisation pour le mode de nettoyage. Merci de nous communiquer vos impressions sur le produit. (améliorations du produit, réclamations, expérience, etc.) En cas de réclamation, veuillez nous retourner le produit concerné avec sa date d'achat, le numéro de lot (imprimé sur l'emballage, s'il est encore en votre possession), des photos et une description détaillée du problème. Contactez-nous sur mambaby.com

